

redicine®

# ReMed+

The Smart Pillbox Like Never Before






## अनुक्रमणिका

1. बॉक्स में क्या है?	2
2. उत्पाद की विशेषताएँ	3
3. अपने रेमेड+ के बारे में जानना	4
4. तुरत प्रारम्भ निर्देशिका	6
5. सेटअप रेमेड+	
5.1 अपना डिवाइस कॉन्फ़िगर करें	7
5.2 दवा जोड़ें	8
5.3 पालन रिपोर्ट	10
5.4 बैटरी की जानकारी	11
5.5 विलम्ब बटन	12
5.6 डिवाइस रीसेट	12
6. सुरक्षा संबंधी जानकारी	13
7. वारंटी	14
8. उत्पाद की जानकारी	15
9. संपर्क जानकारी	16

## 1. बॉक्स में क्या है?

- रेमेड+
- यूएसबी-सी टाइप केबल
- उपयोगकर्ता मैनुअल
- धन्यवाद का कार्ड

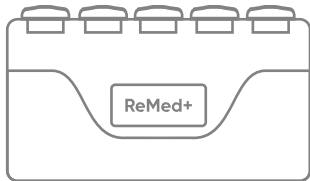

(2)

## 2. उत्पाद की विशेषताएँ



दवा  
अनुस्मारक



मोबाइल ऐप  
पालन रिपोर्ट



अनुस्मारक  
याद दिलाएं



ब्लूटूथ



यूएसबी  
टाइप-सी  
पोर्ट




प्रकाश  
संकेत




10 दिन की  
बैटरी लाइफ

### 3. अपने रेमेड+ के बारे में जानना

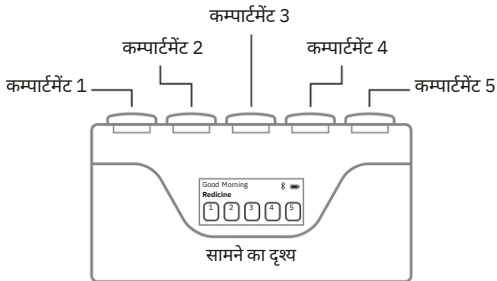

### 3. अपने रेमेड+ के बारे में जानना

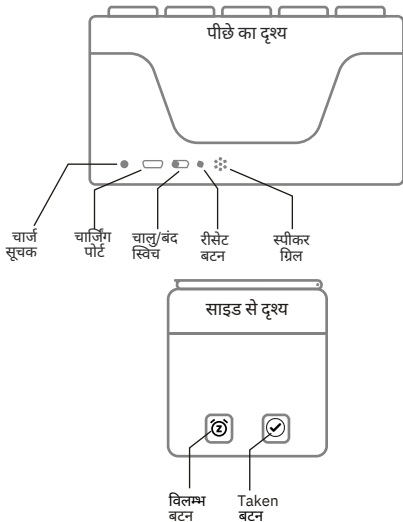

(5)

#### 4. तुरत प्रारम्भ निर्देशिका

- डिवाइस को चालू करने के लिए स्लाइड स्विच को यूएसबी पोर्ट की ओर ले जाएं। डिस्प्ले में 5 सेकंड लगेंगे और होम स्क्रीन प्रदर्शित हो जाएगी।
- अपने मोबाइल पर रेडिसिन ऐप खोलें और पिलबॉक्स आइकन पर टैप करें।
- अपने पिलबॉक्स से कनेक्ट करने के लिए "REMEDI\_XXXX" पर टैप करें। अब आप अपनी दवाओं का शेड्यूल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।



## 5. सेटअप रीमेड+

### 5.1 अपना डिवाइस कॉन्फ़िगर करें

- एप्लिकेशन खोलें और पिलबॉक्स सिंबल पर टैप करें। वहां आपको कनेक्टेड डिवाइस में अपनी डिवाइस दिखाएगी। उस कनेक्टेड डिवाइस पर क्लिक करें और आप "पिलबॉक्स सेटिंग्स" पर नेविगेट करेंगे।
- "Name" पर क्लिक करें और अपने डिवाइस का नाम बदलें। (अक्षर सीमा 15)
- आप इस पृष्ठ पर बैटरी प्रतिशत देख सकते हैं।
- आप एप्लिकेशन से डिवाइस "अलार्म वॉल्यूम" को चालू/बंद कर सकते हैं।
- आप एप्लिकेशन से "स्नूज़ अवधि" समय बदल सकते हैं। जब आप डिवाइस पर स्नूज़ बटन दबाते हैं, तो यह आपको स्नूज़ अवधि में निर्धारित समय के बाद अपनी वर्तमान दवा लेने की याद दिलाएगा।

## 5.2 दवा जोड़ें

- ब्लूटूथ के माध्यम से डिवाइस को मोबाइल से कनेक्ट करें।
- रेडिसिन एप्लिकेशन खोलें और + पर टैप करें
- अपनी दवा की जानकारी के सभी विवरण भरें। एप्लिकेशन का उपयोग करके, एक डिब्बे का चयन करें जो आपकी दवा के लिए उपयुक्त है, और दवा को चयनित डिब्बे के अंदर रखें।
- आप कितनी बार लेते हैं? आपको कितनी बार दवाएँ लेनी हैं इसके आधार पर आप एक विकल्प चुन सकते हैं।

-अगर आपको सेवन करना जरूरी है

दैनिक आधार पर दवा,

आप विकल्प का चयन कर सकते हैं

"हर दिन" का.

-अगर आपको सेवन करना जरूरी है

कुछ पर दवाएँ

सप्ताह के चयनित दिन,

"चयनित दिन" पर टैप करें।


(8)



◦ यदि आपको कुछ दिनों में दवा का सेवन करना आवश्यक है अंतराल, "दिन अंतराल" पर टैप करें। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास है दिन में तीन बार एक बार दवा लेने के लिए अंतराल, आपको इस विकल्प और 3 विकल्प का चयन करना होगा स्लाइडर से.


- दिन में कितनी बार कितनी बार इंगित करता है एक दिन में ली जाने वाली दवाएँ। उदाहरण के लिए: यदि कोई डॉक्टर है "दिन में तीन बार" लेने के लिए एक दवा निर्धारित करता है, फिर एप्लिकेशन से उस विकल्प का चयन करें और नुस्खे के अनुसार खुराक और समय जोड़ें।
- स्मार्ट लाइट विंडो आपको अद्वितीय तरीके से अलार्म सेट करने की सुविधा देती है विविधताएँ। उदाहरण के लिए: यदि आपका सामान्य भोजन का समय बीच में है रात्रि 8:00 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक, आप एक घंटा निर्धारित कर सकते हैं प्रकाश खिड़की का.

(9)

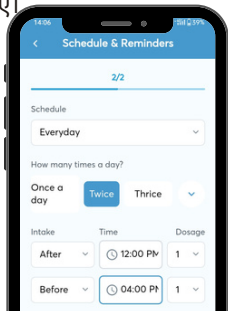

### 5.3 पालन रिपोर्ट

- पालन रिपोर्ट से पता चलता है कि मरीज कितनी अच्छी तरह पालन करता है एक उपचार योजना, जैसे कि वे अपनी दवा निर्धारित अनुसार ले रहे हैं। यह डॉक्टरों/देखभाल करने वालों को यह देखने में मदद करता है कि मरीज नुस्खे का पालन कर रहा है या नहीं।
- मोबाइल एप्लिकेशन में अनुपालन रिपोर्ट देखने के लिए, कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- रेडिसिन एप्लिकेशन खोलें और डिवाइस से कनेक्ट करें.
- इसके बाद रिपोर्ट पर टैप करें। अभी सिंक करने के लिए पृष्ठ को नीचे स्क्रॉल करें और रिपोर्ट लोड हो जाएगी आपकी मोबाइल स्क्रीन

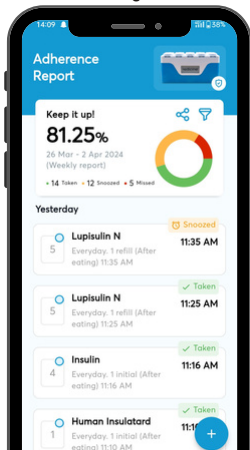

## 5.4 बैटरी की जानकारी

- आपके ReMed+ की बैटरी लाइफ एक बार चार्ज करने पर 10 दिनों तक है। (उपयोग के अधीन)
- डिस्प्ले पर बैटरी का प्रतीक दिखाया गया है। यदि डिस्प्ले पर बैटरी का चिन्ह खाली (□) दिखाता है फिर चार्जर को तुरंत डिवाइस से कनेक्ट करें।
- चार्जिंग के दौरान डिवाइस की चार्जिंग LED होगी लाल और चार्जिंग प्रतीक (⚡) प्रदर्शित होगा।
- जब बैटरी का सिंबल फुल (■) हो जाता है चार्जिंग, इसका मतलब है कि बैटरी चार्ज हो गई है और डिवाइस की चार्जिंग एलईडी हरी होगी।

## 5.5 विलम्ब बटन

- स्नूज़ बटन को एक बार दबाने पर, यह दवा को 10 मिनट (या सेटिंग्स से निर्धारित समय के अनुसार) के लिए स्नूज़ कर देगा।
- यह बटन दवा लेने का भी काम करता है  
दूसरे डिब्बे में संग्रहीत. दवा लेने के लिए  
दूसरे डिब्बे से, स्नूज़ बटन को 5 सेकंड के लिए दबाकर रखें।

## 5.6 डिवाइस रीसेट

- यदि आपको कभी भी अपने डिवाइस के साथ नई शुरुआत की आवश्यकता हो, तो रीसेट बटन मदद के लिए यहां है। बस इसे 10 सेकंड के लिए दबाकर रखें। आपका उपकरण एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाएगा. चाहे आप इसे किसी प्रियजन को दे रहे हों या बस इसे फिर से स्थापित करना चाहते हों, यह सुविधा आ जाएगी।

## 6. सुरक्षा संबंधी जानकारी

- उपयोगकर्ता पुस्तिका पढ़ें और सभी निर्देशों और चेतावनियों का पालन करें।
- उत्पाद को पानी और अन्य तरल पदार्थों से दूर रखें।
- उत्पाद को सीधे ताप स्रोतों से दूर रखें।
- यदि उत्पाद क्षतिग्रस्त या टूटा हुआ दिखाई दे तो उसका उपयोग न करें।  
उत्पाद का उपयोग ऐसे तरीके से न करें जो खतरनाक हो, जैसे गाड़ी चलाते समय या भारी मशीनरी चलाते समय।
- उत्पाद को बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें।
- डिवाइस को स्वयं खोलने या मरम्मत करने का प्रयास न करें, क्योंकि इससे डिवाइस खराब हो सकता है और वारंटी रद्द हो सकती है।
- यदि आपको किसी खराबी या सुरक्षा उल्लंघन का संदेह हो तो तुरंत अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को सूचित करें।
- उचित कामकाज और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिवाइस को चार्ज करने के लिए डिवाइस के साथ दिए गए केबल का ही उपयोग करें।
- अपने दवा शेड्यूल में कोई भी बदलाव करने से पहले हमेशा अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श लें।


## 7. वारंटी

हमारा मेडिसिन रिमाइंडर पिलबॉक्स 1 साल की वारंटी के साथ आता है आपके मन की शांति के लिए.

- उपभोक्ता को वारंटी संबंधी जानकारी पढ़नी चाहिए खरीद की रसीद या सबूत सावधानी से रखें और रखें दावा करना आवश्यक होगा.
- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस वारंटी में कुछ हो सकते हैं सीमाएँ या बहिष्करण, जैसे क्षति को कवर न करना दुरुपयोग या उपेक्षा के कारण।
- संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए ग्राहक सेवा उपलब्ध है वारंटी और उत्पाद। वारंटी मूल मालिक के लिए मान्य होगी और नहीं बाद के मालिकों कोस्तांतरणीय।
- वारंटी शर्तें परिवर्तन के अधीन हैं, कृपया हमारा संदर्भ लें नवीनतम वारंटी जानकारी के लिए वेबसाइट।
- "वारंटी का दावा करने के लिए, कृपया [support@redicinemedsol.com](mailto:support@redicinemedsol.com) से संपर्क करें"



## 8. उत्पाद की जानकारी

- Bluetooth: Supports up to Bluetooth 5.4
- Power Input: 1.7V-5.5V  1A (USB-C Type)
- Dimension: 215mm x 113mm x 113mm
- (LxWxH) Battery: 3.7V 1800mAh (Rechargeable)
- Display: E-Paper Display - 2.9 inch  
296x128 Pixel (DPI - 125)

## 9. संपर्क जानकारी

किसी अन्य प्रश्न के लिए  
हम तक पहुंचें

+91-9601071614

info@redicinemedsol.com

www.redicinemedsol.com

**हम रेडिसिन के साथ आपके एक खूबसूरत अनुभव की कामना करते हैं।**



रेडिसिन मोबाइल एप्लिकेशन  
डाउनलोड करने के लिए  
QR कोड को स्कैन करें



अपनी भाषा में मेनुअल  
पढ़ने के लिए  
QR कोड को स्कैन करें



