

redicine®

ReMed+

The Smart Pillbox Like Never Before




અનુક્રમણિકા

1. બોક્સમાં શું છે	2
2. ઉત્પાદન સુવિધાઓ	3
3. તમારા ReMed+ ને જાણવું	4
4. ઝડપી શરૂઆત	6
5. ReMed+ સેટઅપ કરો	
5.1 તમારા ઉપકરણને ગોઠવો	7
5.2 દવા ઉમેરો	8
5.3 પાલન અહેવાલ	10
5.4 બેટરી માહિતી	11
5.5 સ્નૂઝ બટન	12
5.6 ઉપકરણ રીસેટ કરો	12
6. સલામતી માહિતી	13
7. વોરંટી	14
8. ઉત્પાદન માહિતી	15
9. સંપર્ક માહિતી	16

1. બોક્સમાં શું છે

- ReMed+
- યુએસબી-સી પ્રકાર
- કેબલ વપરાશકર્તા
- માર્ગદર્શિકા આભાર કાર્ડ

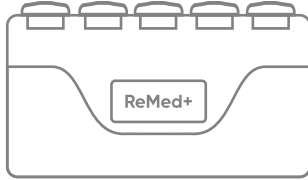

(2)

2. ઉત્પાદન સુવિધાઓ



દવા
રીમાઇન્ડર્સ



મોબાઇલ
એપ્લિકેશન
પાલન
અહેવાલો



સ્નૂઝ
રીમાઇન્ડર્સ



બ્લુટૂથ



યુએસબી-સી
પોર્ટ




પ્રકાશ સંકેત




10 દિવસની
બેટરી લાઇફ

3. તમારા ReMed+ ને જાણવું

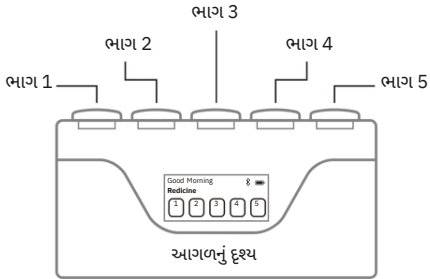

3. તમારા ReMed+ ને જાણવું

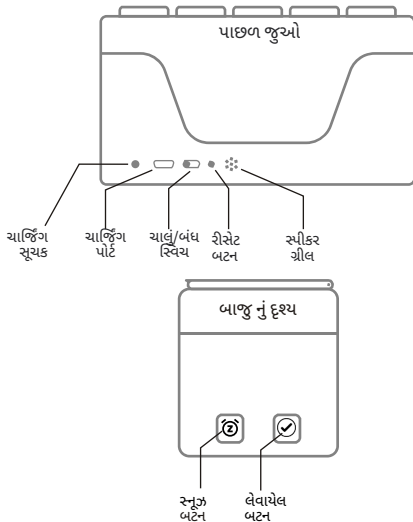

(5)

4. ઝડપી શરૂઆત

- ઉપકરણને ચાલુ કરવા માટે સ્લાઇડ સ્વીચને USB પોર્ટ તરફ ખસેડો. ડિસ્ખલેમાં 5 સેકન્ડનો સમય લાગશે અને હોમ સ્ક્રીન પ્રદર્શિત થશે.
- તમારા મોબાઇલ પર રેડિસિન એપ ખોલો અને પિલબોક્સ આઇકોન પર ટેપ કરો.
- તમારા પિલબોક્સ સાથે કનેક્ટ થવા માટે "REMED_XXXX" પર ટેપ કરો. હવે તમે તમારી દવાઓ શેડ્યુલ કરવા માટે તૈયાર છો.

5. ReMed+ સેટઅપ કરો

5.1 તમારા ઉપકરણને ગોઠવો

- એપ્લિકેશન ખોલો અને પિલબોક્સ પ્રતીક પર ટેપ કરો. ત્યાં તમે કનેક્ટેડ ઉપકરણમાં તમારું ઉપકરણ જોશો. તે કનેક્ટેડ ઉપકરણ પર ક્લિક કરો અને તમે "પિલબોક્સ સેટિંગ્સ" પર નેવિગેટ કરશો.
- "નામ" પર ક્લિક કરો અને તમારા ઉપકરણનું નામ બદલો. (પાઠ મર્યાદા 15)
- તમે આ પૃષ્ઠ પર બેટરી ટકાવારી જોઈ શકો છો.
- તમે એપ્લિકેશનમાંથી ઉપકરણ "એલાર્મ વોલ્યુમ" ચાલુ/બંધ કરી શકો છો.
- તમે એપ્લિકેશનમાંથી "સ્નૂઝ અવધિ" સમય બદલી શકો છો. જ્યારે તમે ઉપકરણ પર સ્નૂઝ બટન દબાવો છો, ત્યારે તે તમને સ્નૂઝ અવધિમાં સેટ કરેલ સમય પછી તમારી વર્તમાન દવા લેવાનું યાદ કરાવશે.

5.2 દવા ઉમેરો

- બ્લૂટૂથ દ્વારા ઉપકરણને મોબાઇલ સાથે કનેક્ટ કરો.
- રેડિસિન એપ્લિકેશન ખોલો અને + પર ટેપ કરો
- તમારી દવાની માહિતીની તમામ વિગતો ભરો. એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને, તમારી દવા માટે યોગ્ય હોય તે ડબ્બો પસંદ કરો અને પસંદ કરેલા ડબ્બાની અંદર દવા મૂકો.
- તમે કેટલી વાર લો છો? તમારે કેટલી વાર દવાઓ લેવી પડશે તેના આધારે તમે વિકલ્પ પસંદ કરી શકો છો.
 - જો તમારે સેવન કરવું જરૂરી હોય તો દૈનિક ધોરણે દવા, તમે વિકલ્પ પસંદ કરી શકો છો "રોજરોજ" ના.
 - જો તમારે સેવન કરવું જરૂરી હોય તો કેટલાક પર દવાઓ અઠવાડિયાના પસંદ કરેલા દિવસો, "પસંદ કરેલા દિવસો" પર ટેપ કરો.

(8)




◦ જો તમારે અમુક દિવસોમાં દવા લેવાની જરૂર હોય અંતરાલ, "દિવસ અંતરાલ" પર ટેપ કરો. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમારી પાસે હોય દિવસમાં એક વખત દિવસમાં ત્રણ વખત દવા લેવી અંતરાલ, તમારે આ વિકલ્પ અને ૩ વિકલ્પ પસંદ કરવો પડશે સ્લાઇડરમાંથી.

- **દિવસમાં કેટલી વખત** સૂચવે છે કે કેટલી વાર એક દિવસમાં લેવામાં આવતી દવાઓ. ઉદાહરણ તરીકે: જો ડૉક્ટર "દિવસમાં ત્રણ વખત" લેવા માટેની દવા સૂચવે છે. પછી એપ્લિકેશનમાંથી તે વિકલ્પ પસંદ કરો અને ઉમેરો


- **સ્માર્ટ લાઇટ વિન્ડો** તમને અનન્ય સાથે એલાર્મ સેટ કરવા દે છે વિવિધતા ઉદાહરણ તરીકે: જો તમારો સામાન્ય ભોજનનો સમય વચ્ચેનો હોય રાત્રે 8:00 થી 8:30, તમે અડધો કલાક અથવા કલાક સેટ કરી શકો છો લાઇટ વિન્ડોની સુવિધા માટે તમારી દવા લો.

(9)

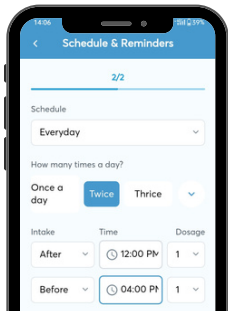

5.3 પાલન અહેવાલ

- પાલન અહેવાલ દર્શાવે છે કે દર્દી કેટલી સારી રીતે અનુસરે છે સારવાર યોજના, જેમ કે જો તેઓ સૂચવ્યા મુજબ તેમની દવા લેતા હોય. દર્દી પ્રિસ્ક્રિપ્શનને વળગી રહ્યો છે કે કેમ તે જોવા માટે તે ડોક્ટરો/કેરગીવર્સને મદદ કરે છે.
મોબાઇલ એપ્લિકેશનમાં પાલન અહેવાલ જોવા માટે, કૃપા કરીને નીચે આપેલા પગલાંને અનુસરો:
- રેડિસિન એપ્લિકેશન ખોલો અને ઉપકરણ સાથે કનેક્ટ કરો.
- પછી રિપોર્ટ પર ટેપ કરો.
- હમણાં સમન્વય કરવા માટે પૃષ્ઠને નીચે સ્ક્રોલ કરો અને રિપોર્ટ લોડ કરવામાં આવશે તમારી મોબાઇલ સ્ક્રીન.

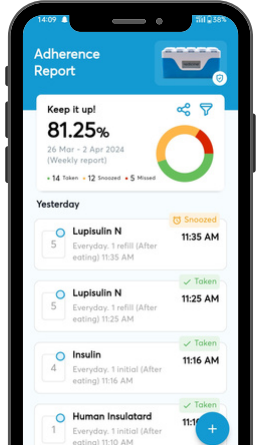

5.4 બેટરી માહિતી

- તમારા ReMed+ ની બેટરી આવરદા એક ચાર્જ પર 10 દિવસ સુધીની છે. (ઉપયોગને આધીન)
- બેટરી સિમ્બોલ ડિસ્પ્લે પર દર્શાવેલ છે.
 - જો બેટરી પ્રતીક ડિસ્પ્લે પર ખાલી (□) દર્શાવે છે પછી તરત જ ચાર્જરને ઉપકરણ સાથે કનેક્ટ કરો. ચાર્જિંગ દરમિયાન ઉપકરણનું ચાર્જિંગ LED હશે લાલ અને ચાર્જિંગ પ્રતીક (⏻) પ્રદર્શિત થશે.
 - જ્યારે બેટરી પ્રતીક (■) થી ભરાઈ જાય છે ચાર્જિંગ, તેનો અર્થ એ છે કે બેટરી ચાર્જ થઈ છે અને ઉપકરણનું ચાર્જિંગ LED લીલું હશે.

5.5 સ્નૂઝ બટન

- સ્નૂઝ બટનને એકવાર દબાવવાથી, તે 10 મિનિટ (અથવા સેટિંગ્સમાંથી સેટ કરેલા સમય અનુસાર) દવાને સ્નૂઝ કરશે.
- આ બટન દવા લેવાનું પણ કામ કરે છે બીજા કમ્પાર્ટમેન્ટમાં સંગ્રહિત. દવા લેવા માટે બીજા કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી, સ્નૂઝ બટનને 5 સેકન્ડ માટે દબાવી રાખો.

5.6 ઉપકરણ રીસેટ કરો

- જો તમને ક્યારેય તમારા ઉપકરણ સાથે નવી શરૂઆતની જરૂર હોય, તો રીસેટ બટન મદદ કરવા માટે અહીં છે. ફક્ત તેને 10 સેકન્ડ માટે દબાવી રાખો. તમારું ઉપકરણ નવી શરૂઆત માટે તૈયાર હશે. ભલે તમે તેને કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને આપી રહ્યાં હોવ અથવા તેને ફરીથી સેટ કરવા માંગતા હોવ, આ સુવિધા આવશે.

6. સલામતી માહિતી

- વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકા વાંચો અને બધી સૂચનાઓ અને ચેતવણીઓને અનુસરો.
- ઉત્પાદનને પાણી અને અન્ય પ્રવાહીથી દૂર રાખો.
- ઉત્પાદનને સીધા ગરમીના સ્ત્રોતોથી દૂર રાખો.
- જો ઉત્પાદન ક્ષતિગ્રસ્ત અથવા તૂટેલું જણાય તો તેનો ઉપયોગ કરશો નહીં.
- ખતરનાક બની શકે તેવી રીતે ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરશો નહીં, જેમ કે વાહન ચલાવતી વખતે અથવા ભારે મશીનરી ચલાવતી વખતે.
- ઉત્પાદનને બાળકો અને પાલતુ પ્રાણીઓની પહોંચથી દૂર રાખો.
- ઉપકરણને જાતે ખોલવાનો અથવા રિપેર કરવાનો પ્રયાસ કરશો નહીં, કારણ કે આ ઉપકરણને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે અને વોરંટી રદ કરી શકે છે.
- જો તમને કોઈ ખામી અથવા સુરક્ષા ભંગની શંકા હોય તો તરત જ તમારા આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાને સૂચિત કરો.
- યોગ્ય કામગીરી અને સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે ઉપકરણને ચાર્જ કરવા માટે ઉપકરણ સાથે આપવામાં આવેલ કેબલનો જ ઉપયોગ કરો.
- તમારા દવાના સમયપત્રકમાં કોઈપણ ફેરફાર કરતા પહેલા હંમેશા તમારા આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાની સલાહ લો.


7. વોરંટી

અમારી દવા રીમાઇન્ડર પિલબોક્સ 1 વર્ષની વોરંટી સાથે આવે છે તમારા મનની શાંતિ માટે.

- ગ્રાહકે વોરંટી માહિતી વાંચવી જોઈએ કાળજીપૂર્વક અને ખરીદીની રસીદ અથવા પુરાવો જેમ બને તેમ રાખો દાવો કરવા માટે જરૂરી છે.
- એ નોંધવું અગત્યનું છે કે આ વોરંટી કેટલીક હોઈ શકે છે મર્યાદાઓ અથવા બાકાત, જેમ કે નુકસાનને આવરી લેતા નથી દુરુપયોગ અથવા ઉપેક્ષાને કારણે.
- સંબંધિત કોઈપણ પ્રશ્નો માટે ગ્રાહક સેવા ઉપલબ્ધ છે વોરંટી અને ઉત્પાદન.
- વોરંટી મૂળ માલિક માટે માન્ય રહેશે અને નહીં અનુગામી માલિકોને સ્થાનાંતરિત કરી શકાય છે.
- વોરંટી શરતો ફેરફારને પાત્ર છે, કૃપા કરીને અમારો સંદર્ભ લો નવીનતમ વોરંટી માહિતી માટે વેબસાઇટ.

"વોરંટીનો દાવો કરવા માટે, કૃપા કરીને support@redicinemedsol.com નો સંપર્ક કરો"

8. ઉત્પાદન માહિતી

- Bluetooth: Supports up to Bluetooth 5.4
- Power Input: 1.7V-5.5V  1A (USB-C Type)
- Dimension: 215mm x 113mm x 113mm
- (LxWxH) Battery: 3.7V 1800mAh (Rechargeable)
- Display: E-Paper Display - 2.9 inch
296x128 Pixel (DPI - 125)

9. સંપર્ક માહિતી

અન્ય કોઈપણ પ્રશ્ન માટે
અમારા સુધી પહોંચો

+91-9601071614

info@redicinemedsol.com

www.redicinemedsol.com

અમે તમને Redicine સાથે સુંદર અનુભવની ઇચ્છા કરીએ છીએ.



Redicine મોબાઇલ એપ્લિકેશન
ડાઉનલોડ કરવા માટે
QR કોડ સ્કેન કરો



તમારો ભાષામાં માર્ગદર્શિકા
વાંચવા માટે
QR કોડ સ્કેન કરો

